

Montage aanpassingen 07/10/2019

Last Modified on 28/01/2020 9:16 am EST

Aanpassingen voor Montages: (07/10/2019 en later)

- Noteer Merk + Model + Kleur van Montuur dat klant verzendt
 - OP de **bestelbon** van de klant
 - én in LW onder **Remark Intern**
- Bij aanpassingen van bvb PD, H,...:
 - ALTIJD klant bellen voor zijn akkoord
 - Indien klant akkoord : Aangepaste PD, H,... op **bestelbon** noteren mét je **paraf**
 - Én in LW onder **Remark Intern**
- Ingegeven montages op kast plaatsen (aan de snoep)
- Eno/Paul nemen die zelf mee naar het montage-atelier
- Enkel montagebon, waarvan glas in bestelling staat, blijft bij CSS op de kast
- Montage+ glas, maar zonder montuur, (klant heeft bril nog op) totdat montuur binnenkomt => blijft bij CSS op de kast staan
- Montuur + glas => Lens Type --06 / Dia 99 /
 - Ook de **Dpt** van de klant ingeven ipv **0,00** aub
 - Zie voorbeeld onderaan
- Elke avond krijgt CSS de montage-bonnen van de verzonden montages van Paul/Eno :
 - CSS houdt deze zelf op de afdeling bij
 - CSS sorteert deze op alfabetische volgorde
 - Kaften worden minstens 1 maand bijhouden ivm controle van montages

Nieuwe montagebakjes staan in bestelling => Geert

(mat witte + andere kleur voor 'wachten op montuur/glazen')

- Besteldatum komt op bakje

- Oudste montages worden ALTIJD eerst gemaakt
- Oudste montages hebben **voorrang** op stockglazen
- Enige uitzondering: Klant komt montage afgeven bij DC, dan Spoed order en krijgt voorrang.
- Nummers die net gebruikt zijn, worden minimum 1 week apart geplaatst, alvorens opnieuw in gebruik genomen te worden
Dit om vergissingen met montages te voorkomen.
- Oude glazen van de klant gaan ALTIJD Retour met de Montage naar de klant. (Dit is de klant zijn eigendom.)

Voorbeeld van bestelling voor Montage bij DeCeunynck:

- Montuur komt samen met bestelling aan bij DeCeunynck

Zie voorbeeld hieronder

Datum voorschrift					06/05/2019					Opmerking Eigen onderzoek				
	Ver		As	Add	Pupilafstand		Nabij			Visus		Hoogte	Prisma	
	Sph	Cyl			Ver	Nabij	Sph	Cyl	As	Voor	Na		Hor.	Vert.
R	+2,00	-1,75	180	2,50	33,5		+4,50	-1,75	180					
L	+2,00	-1,75	180	2,50	33,5		+4,50	-1,75	180					

Datum verkoop			06/05/2019			Bakje 4			1/1		
Aard	Besteld	Identificatie	Omschrijving			Lev	Stat	BTW	Status	BEF	Euro
Mon	1	701 477 5515	blackfin			RMG	MH	21 %	AT	11.900	295,00
Monta		R: B/O:0 N/T:0 H:21	L: B/O:0 N/T:0 H:22						M		
Glas	R P 1	AN6P 65/70	Anateo 1.6			DC/DC	PO	21 %	AT	16.459	408,00
Sup	2	MXUVR	Neva Max UV (Rx)			DC/DC	S		AT		
Glas	L P 1	AN6P 65/70	Anateo 1.6			DC/DC	PO	21 %	AT	16.459	408,00
Totaal bakje										44.818	1.111,00
Totaal verkoop										44.818	1.111,00
Korting										-2.461	-61,00
Te Betalen										42.357	1.050,00
Saldo										42.357	1.050,00

1905070163

Datum afhaling _____ Verwittigen _____

OPTIFAR BVBA
Apotheker Tom Dezillie
6 MEI 2019

Ninoofsesteenweg 936 • 1703 Schepdaal
Tel. 02 5692139 • Fax. 02 5670480
2370.01-2-11016-36-001 • BTW. 0479.850.684

OPTIFAR bvba
OPTICIEN - OPTOMETRIST : Tom DEZILLIE
Ninoofsesteenweg 936 1703 SCHEPDAAL
Tel. 02/569.21.39 info@optifar.be
BTW: BE 0479 850 684
1-6-64535-12-500

DANK

Blackfin
→ flat edge → Zin Montage
Ekh 2,3 nemen

Pagina 1 / 1

- To Do Montages ingeven in LensWare:

Tabblad BASIC DATA 1ste deel:

Order Type = FRAME TO COME

- Assembly No = Nummer van Montage Bakje bvb 089
- Klantnaam
- Referentie

o Remark Int : hier beschrijf je het montuur

§ Blackfin BF701 + dit schrijf je ook op de montagebon van de klant!

- Patient Name (max 30 posities)
- LensType : AN6P
- Opt aanvinken: ✓
- Of DIA : bij bvb Stock glazen of - glazen die geen extra randdikte nodig hebben dan Standaard Diameter ingeven
- Add 1 : gevraagde Coating
- Add2 : Montage-code, zie lijst voor de te gebruiken montage-codes
- Sph Cyl..... As ADD
- Bij montages ALTIJD volgende gegevens nodig:
 - o PD
 - o H
 - o Boxing maten : X (= A) / Y (=B) / DBL (=C)
 - o Form No è zie bijgevoegde info ivm standaard vormen
 - o Eth = randdikte die belangrijk is ivm montuurtype

(bij unifocaal RX, Progressief, niet bij stockglazen)

Printscreen 1/ bestelling Montage:

LO Qt - Order entry

10050560 - OPTIFAR - 1703 SCHEPDAAL - DILBEEK - STEENWEG OP NINOVE 936 - 02/569

Order type: **Frame to come** | Side: **Both** | Job No: **1905070163** | Requested date: | Copied from: |
 Entry type: | Slip No: | Order No ext: | Entry date: **07.05.2019**
 Type: **Standard** | Assembly No: **035** | Entered via: **LENSORDER**
 Contact: **SB**

Customer: **10050560 T OPTIFAR** | Second pair: First pair: |
 Reference: **BAKJE 4** | Reference 2: |
 Remark: | Remark int: **BLACKFIN BF701** | Patient name: |

	Lens type	Eli	Opt	Div	Eilh	Add 1	Add 2	Add 3	Add 4	Add 5	Add 6	Add 7	Bal
R	AN6P	C	<input checked="" type="checkbox"/>	6570		MXUVR	M29	DIG					
L	AN6P	C	<input checked="" type="checkbox"/>	6570		MXUVR	M29	DIG					

	Sphere	Cylinder	Axis	Addition	Prism	Base	Prism 2	Base 2	PD	Height	Dec X	Dec Y	Box X	Box Y	DBL	Form No
R	+2.00	-1.75	180	2.50					33.5	21.0	3.5	2.5	56.0	37.0	18.0	
L	+2.00	-1.75	180	2.50					33.5	22.0	-3.5	3.5				

	ETH	CTH	Curve	DrhTh	CVD	Inset	Wrap	Panto	Obj.dist	Proglen	Initial
R	2.3										
L	2.3										

Text delivery note: |
 Quality inspection: | External production: |
 Advance payment: | No calculation: | No pricing:
 Service premier: | No consumption: | No printing:
 Reduction prism:

Diagram: R: 62.3 L: 61.5


Buttons: Trace shape, Delete shape, Calculate lens, Individual, Show stock, Delete data, Hold basket, Save, Exit

Vervolg deel 2 :

2e Tabblad FORM DATA:

- Hier zie je overzicht van de montage gegevens die je ingaf bij tabblad Basic Data
 - PD
 - H
 - Boxing maten X / Y en DBL
 - Form Nr
- Frame Type
- SAVE order

Printscreen 2/ bestelling Montage:

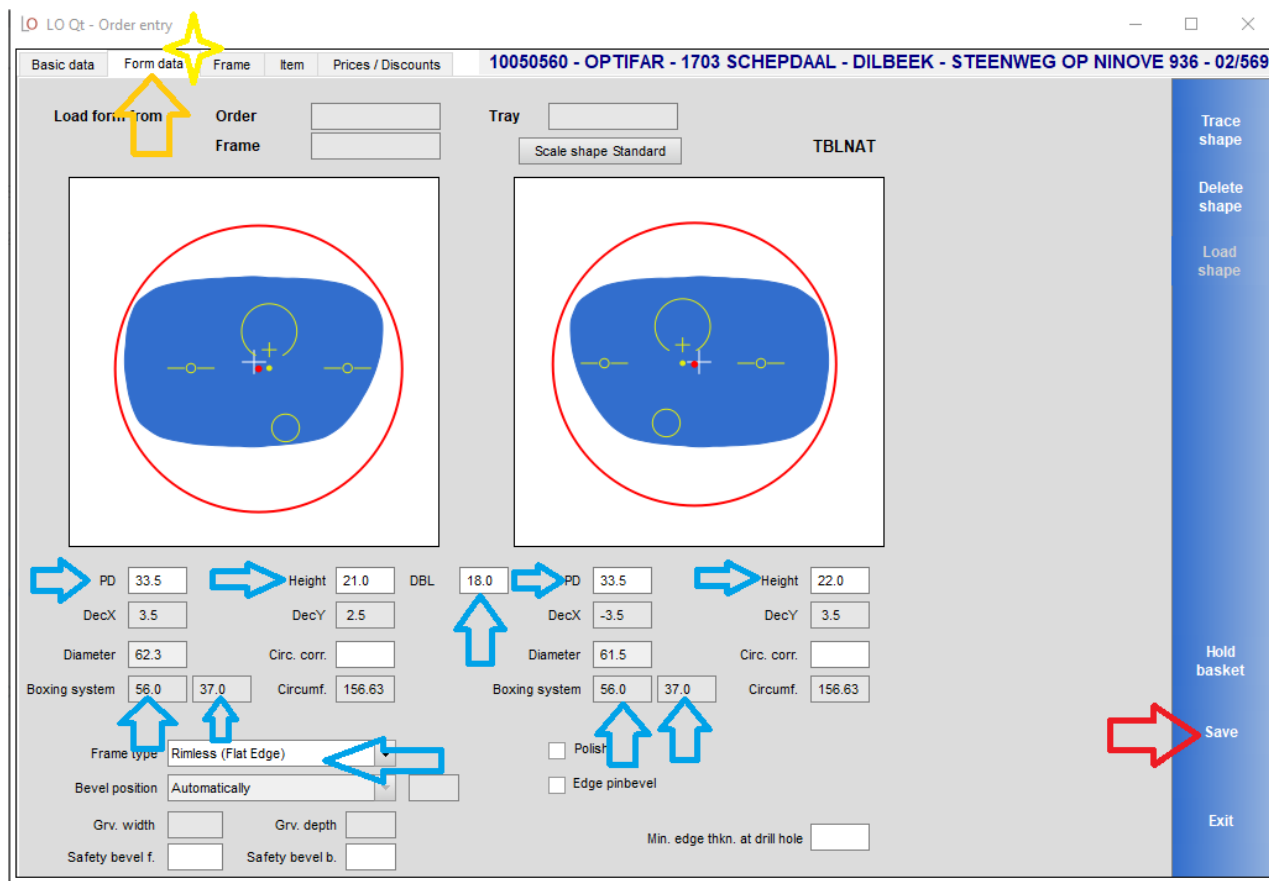

Montuur + glazen Lens Type -06:

Graag ook de Dpt van de klant invullen, ipv Sph 0,00.

Dit op vraag van het montage-atelier.

Basic data		Form data		Frame		Item		Prices / Discounts		10041580 - LIEVE JEHAES - 3660 OUDSBERGEN - WEG NAAR ZWARTBERG 52 B-2 - 089/8															
Order type	Frame to come	Side	Both	Job No		Requested date		C	Copied from	1910020089															
Entry type	--	Slip No		Order No ext		Entry date			Entered via																
Type	Standard	Assembly No	074								Contact														
Customer	10041580 S	LIEVE JEHAES			Second pair	<input type="checkbox"/> First pair	VREVEN																		
Reference	15	Reference 2																							
Remark				Remark int	Mini 742007-10 / Sticker TNT					SC															
	Patient name		Dochter																						
Lens type	Ell	Opt	DM	Eilh	Add 1	Add 2	Add 3	Add 4	Add 5	Add 6	Add 7	Bal													
R	--06	C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	99	M40							<input type="checkbox"/>												
L	--06	C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	99	M40							<input type="checkbox"/>												
Sphere	Cylinder	Axis	Addition	Prism	Base	Prism 2	Base 2	PD	Height	Dec X	Dec Y	Box X	Box Y	DBL	Form No										
R	-4.75							34.0	26.0	0.0	4.5	48.0	43.0	20.0											
L	-4.75							34.0	26.0	0.0	4.5														
ETH	CTh	Curve	DrhTh	CVD	Inset	Wrap	Panto	Obj.dist	Proglen	Initial															
R																									
L																									
Text delivery note																									
Special inspection	<input type="checkbox"/>	External production																							
Advance payment	<input type="checkbox"/>	No calculation	<input type="checkbox"/>	No pricing	<input type="checkbox"/>																				
Express	<input type="checkbox"/>	No consumption	<input type="checkbox"/>	No printing	<input type="checkbox"/>																				
Prism thinning	<input type="checkbox"/>																								
Customer information				Product control				Filter				Plausibility check													

Trace shape
Delete shape
Calculate lens
Individual
Show stock
Delete data
Hold basket
Save
Exit

